




Без уважения к статус-кво

- 
- 3 Информация о HPdent
 - 4 - 7 Кисточки HPdent
 - 8 - 12 Обязательные принадлежности для керамики
 - 13 - 15 HPdent. Шлифовка, полировка и отрезные диски
 - 16 - 21 Изготовление моделей
 - 22- 23 Scanlnk. Жидкость для систем CAD/CAM
CLIP. Инструмент для фиксации (индивидуальных) гибридных абатментов

Без уважения к статус-кво

Мы могли бы просто сказать, что отличаемся высоким качеством.

Но наша истинная цель – превзойти Ваши ожидания.

Мы уверены, что Вам необходимы не только превосходные продукты, но и отличный сервис. Если Вы обращаетесь к нам с вопросом относительно нашей продукции, Вы получите собеседника, который действительно знаком с продуктом, сам с ним работал или даже участвовал в его разработке.

Когда фирма HPdent выпускает новый продукт на рынок, Вы можете быть уверены, что он был основательно испытан группой зубных техников с международной репутацией и высочайшими требованиями.


Другие фирмы называют этих людей „ведущими специалистами”.

Мы же гордимся тем, что можем назвать их друзьями.

А Вы и сами знаете, что настоящий друг всегда говорит правду.

Философия нашей фирмы – быть не такими, как все. И мы гордимся этим!

Искренне Ваша,
Команда HPdent

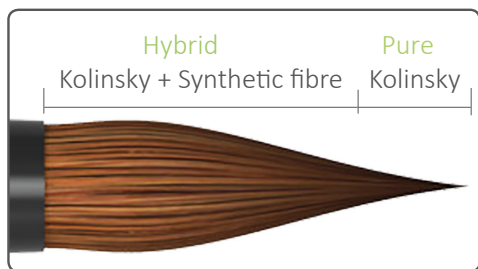

www.hp-dent.com/downloads

Кисточка FUSIONbrush

Эволюция колонковых кисточек

- Колонковый ворс высшего качества + стабилизирующий синтетический ворс.
- Улучшенная стабильность кончика кисточки, состоящего только из колонкового ворса.
- Заостренный кончик кисточки.
- Легкая, сбалансированная алюминиевая ручка.
- Смена насадок осуществляется быстрее за счет магнитного крепления.

* Насадки совместимы с ручками других производителей за счет наличия резьбы



FUSIONbrush

Набор 4-в-1
204-2000



FUSIONbrush

Набор Мастера №2
204-2002

FUSIONbrush

Набор Мастера №4
204-2004



FUSIONbrush

Набор Мастера №6
204-2006

FUSIONbrush

Набор Мастера №8
204-2008

Код	Наименование
204-0008	Кисточка FUSIONbrush №8
204-0006	Кисточка FUSIONbrush №6
204-0004	Кисточка FUSIONbrush №4
204-0002	Кисточка FUSIONbrush №2
204-0009	Кисточка FUSIONbrush stain для красок
204-0010	Кисточка FUSIONbrush opaque/glaze для опак/глазури
204-1008	Насадка для кисточки FUSIONbrush №8 (2 шт.)
204-1006	Насадка для кисточки FUSIONbrush №6 (2 шт.)
204-1004	Насадка для кисточки FUSIONbrush №4 (2 шт.)
204-1002	Насадка для кисточки FUSIONbrush №2 (2 шт.)
204-1009	Насадка для кисточки FUSIONbrush stain для красок (2шт.)
204-1010	Насадка для кисточки FUSIONbrush opaque/glaze для опак/глазури (2шт.)
204-2000	FUSIONbrush – Набор 4-в-1 (Кисточка FUSIONbrush №8 + Насадка №6 + Насадка №4 + Насадка №2)
204-2008	FUSIONbrush – Набор Мастера №8 (Кисточка FUSIONbrush №8 + кисточка FUSIONbrush stain + кисточка FUSIONbrush opaque/glaze)
204-2006	FUSIONbrush – Набор Мастера №6 (Кисточка FUSIONbrush №6 + кисточка FUSIONbrush stain + кисточка FUSIONbrush opaque/glaze)
204-2004	FUSIONbrush – Набор Мастера №4 (Кисточка FUSIONbrush №4 + кисточка FUSIONbrush stain + кисточка FUSIONbrush opaque/glaze)
204-2002	FUSIONbrush – Набор Мастера №2 (Кисточка FUSIONbrush №2 + кисточка FUSIONbrush stain + кисточка FUSIONbrush opaque/glaze)

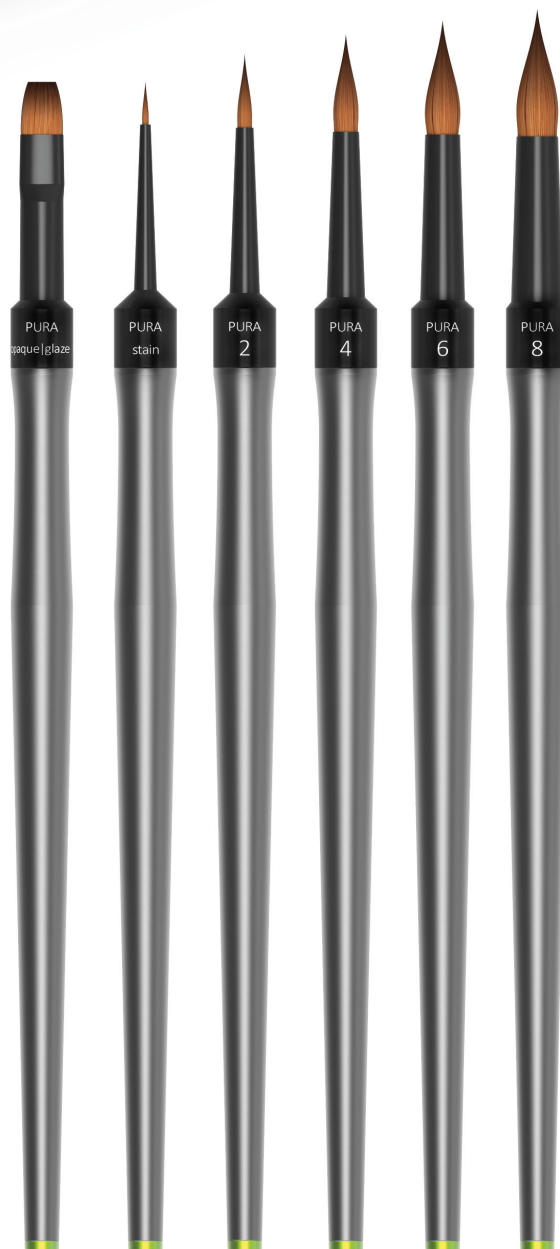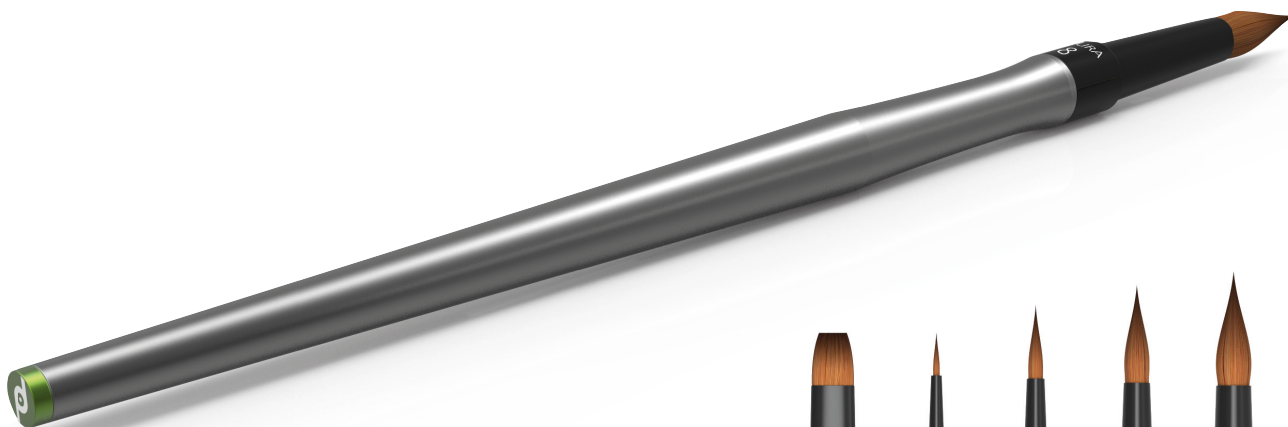

www.hp-dent.com/downloads

Кисточки PURAb^rush

Новый стандарт

- Колонковый ворс высшего качества.
- Заостренный кончик кисточки.
- Легкая, сбалансированная алюминиевая ручка.
- Смена насадок осуществляется быстрее за счет магнитного крепления.

* Насадки совместимы с ручками других производителей за счет наличия резьбы



PURAbbrush

Набор 4-в-1

203-2000



PURAbbrush

Набор Мастера №2
203-2002

PURAbbrush

Набор Мастера №4
203-2004

PURAbbrush

Набор Мастера №6
203-2006

PURAbbrush

Набор Мастера №8
203-2008

Код	Наименование
203-0008	Кисточка PURAbbrush №8
203-0006	Кисточка PURAbbrush №6
203-0004	Кисточка PURAbbrush №4
203-0002	Кисточка PURAbbrush №2
203-0009	Кисточка PURAbbrush stain для красок
203-0010	Кисточка PURAbbrush opaque/glaze для опака/глазури
203-1008	Насадка для кисточки PURAbbrush №8 (2 шт.)
203-1006	Насадка для кисточки PURAbbrush №6 (2 шт.)
203-1004	Насадка для кисточки PURAbbrush №4 (2 шт.)
203-1002	Насадка для кисточки PURAbbrush №2 (2 шт.)
203-1009	Насадка для кисточки PURAbbrush stain для красок (2 шт.)
203-1010	Насадка для кисточки PURAbbrush opaque/glaze для опака/глазури (2 шт.)
203-2000	PURAbbrush – Набор 4-в-1 (кисточка PURAbbrush №8 + Насадка №6 + Насадка №4 + Насадка №2)
203-2008	PURAbbrush – Набор Мастера №8 (Кисточка PURAbbrush №8 + кисточка PURAbbrush stain для красок + кисточка PURAbbrush opaque/glaze для опака/глазури)
203-2006	PURAbbrush – Набор Мастера №6 (Кисточка PURAbbrush №6 + кисточка PURAbbrush stain для красок + кисточка PURAbbrush opaque/glaze для опака/глазури)
203-2004	PURAbbrush – Набор Мастера №4 (Кисточка PURAbbrush №4 + кисточка PURAbbrush stain для красок + кисточка PURAbbrush opaque/glaze для опака/глазури)
203-2002	PURAbbrush – Набор Мастера №2 (Кисточка PURAbbrush №2 + кисточка PURAbbrush stain для красок + кисточка PURAbbrush opaque/glaze для опака/глазури)




Код: 8505 / 8510

Жидкий трегер SuperPeg II

Идеальная паста для фиксации объекта на столбиках при обжиге керамики

- Обеспечивает устойчивость самых сложных керамических работ при обжиге.
- Легко и без остатка удаляется при помощи струи сжатого воздуха.
- Нулевая зольность: отпадает необходимость ручной или пескоструйной обработки после обжига.
- Подходит для кристаллизации фрезерованных реставраций до 1300°C.
- Не требует времени для высыхания.

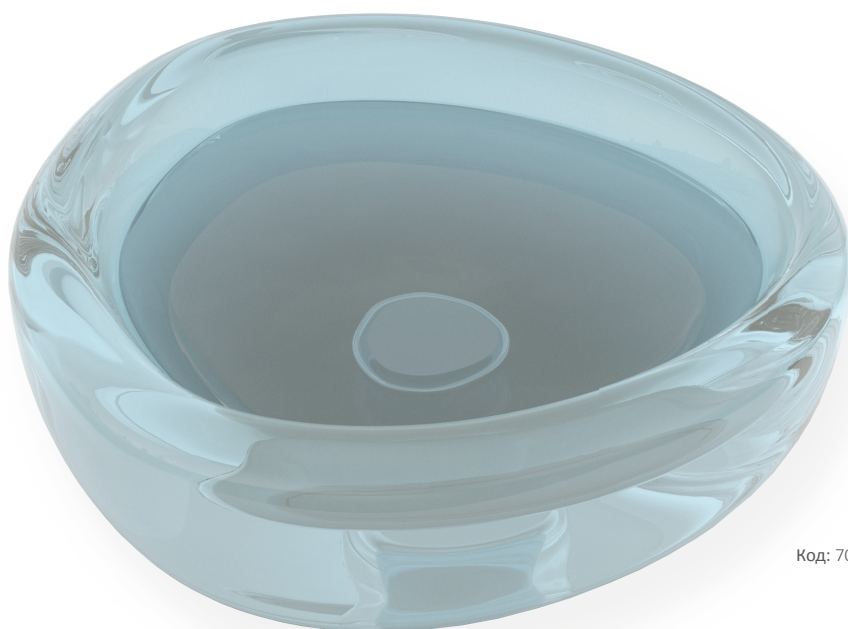

Код: 7005


Опаловая чаша для воды

- Восхитительная игра цветов благодаря опалисцентным свойствам камня.
- Ручная работа японских мастеров-стеклоделов: каждое изделие имеет уникальную форму.
- Украшение для Вашего рабочего места.

Код	Наименование
8505	Жидкий трегер Super Peg II, 12 мл, 1 шт.
8510	Жидкий трегер Super Peg II, 12 мл, 4 шт.
7005	Опаловая миска для воды



www.hp-dent.com/downloads

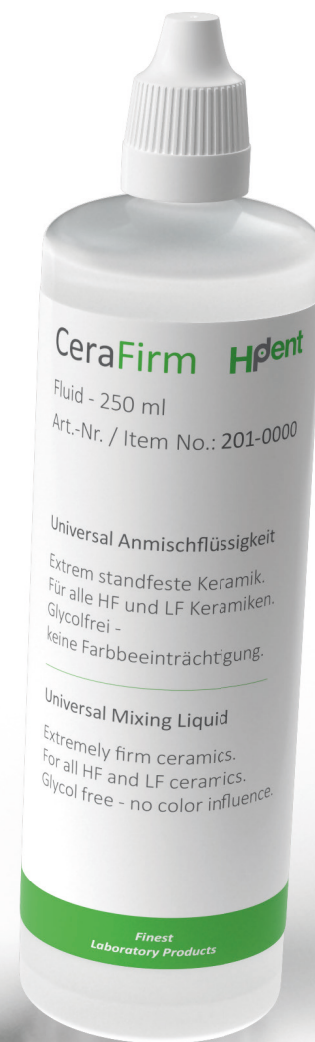

CeraFirm – Моделировка без ограничений

Универсальная система замешивания для всех видов керамики

- Максимальная устойчивость керамики с минимальной усадкой.
- Для всех видов керамики. Не содержит гликоля – нет искажений цветов.
- Экономия времени – не требует промежуточной сушки.
- Используя жидкость (Fluid) и концентрат (Add), Вы можете регулировать уровень вязкости керамической массы.
- Позволяет наносить слои с разной степенью плотности.
- Структуры остаются целыми, даже при нанесении поверхностных слоев.
- Возможность моделирования структуры и текстуры до обжига.
- Нет ограничений – теперь Вы решаете, что может Ваша керамика!

Код	Наименование
201-0000	Жидкость CeraFirm Fluid, 250 мл
201-1000	Концентрат CeraFirm Add, 2 x 3,5 мл
201-2000	Набор CeraFirm Kit, 250 мл жидкости + 1 x 3,5 мл концентрата



Код: 200-0000


Гель для фиксации FixGel

Временный гель для цельной керамики, циркония и для металлокерамики

- Фиксирует коронки и мосты на штампике.
- 100 % натуральный – сгорает без остатка.
- Гель белого цвета – для удобного визуального контроля.
- Не требует времени для высыхания.



Код: 208-0000

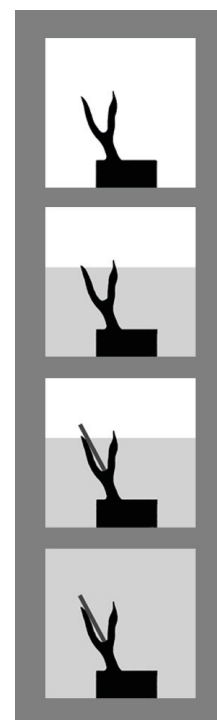

Штифт для паковки InvexPin

Паковочные штифты из диоксида алюминия

- Стабилизация пакуемых колпачков и коронок.
- Делает безопасными процедуры прессовки и литья.
- Укрепляет формовку внутри объекта.
- Можно использовать как с воском так и со смолами.

Код	Наименование
200-0000	Гель для фиксации FixGel 2 x 3,5 мл
208-0000	Стабилизирующие штифты для прессованной керамики InvexPin, 50 шт.



Лак для штампов TruePrep

Система лаков для штампов под цельную керамику

- Воспроизводит естественный цвет штампа.
- На основе палитры IPS e.max® Natural Die Material Shade Guide®.
- Высыхает всего за 15 секунд.



Контурный лак ContourCheck

Визуализирует поверхность передних зубов

- Легко наносится.
- Чрезвычайно тонкий слой – 3мкм.
- Легко удаляется струей пара.
- Высыхает всего за 5 секунд.



Код	Наименование
7500	Набор компенсационных лаков TruePrep, HD1-9
7501	Компенсационный лак TruePrep, 7 мл, HD1
7502	Компенсационный лак TruePrep, 7 мл, HD2
7503	Компенсационный лак TruePrep, 7 мл, HD3
7504	Компенсационный лак TruePrep, 7 мл, HD4
7505	Компенсационный лак TruePrep, 7 мл, HD5
7506	Компенсационный лак TruePrep, 7 мл, HD6
7507	Компенсационный лак TruePrep, 7 мл, HD7
7508	Компенсационный лак TruePrep, 7 мл, HD8
7509	Компенсационный лак TruePrep, 7 мл, HD9
7510	Растворитель TruePrep, 7 мл
7700	Контурный лак ContourCheck, 7 мл, серебрянный



Шлифовальные инструменты YelloStone

Шлифовальные алмазные инструменты нового поколения
Для обработки циркония, дисиликата лития и для всех видов стоматологической керамики

- Высокая износостойчивость.
- Гладкая поверхность.
- Высокая прочность.
- Минимальное тепловыделение.

* макс. 20.000 оборотов в минуту

Совет: для оптимального эффекта охлаждения, увлажняйте поверхность влажной губкой во время шлифовки.

Код	Наименование	Диаметр/ мм
206-0001	Шлифовальный цилиндр YelloStone, маленького размера 1 шт.	5,0 x 13,0
206-0002	Шлифовальный конус YelloStone, маленького размера, 1 шт.	4,0 x 10,5
206-0003	Шлифовальный диск YelloStone, маленького размера, 1 шт.	15,0 x 3,5
206-0004	Шлифовальный диск YelloStone, большого размера, 1 шт.	22,0 x 4,5
206-0005	Шлифовальный диск YelloStone, тонкий, линза, 1 шт.	22,0 x 0,7



Полиры P3.Polish

Идеальный алмазный полир

Подходит для обработки циркония, дисиликата лития и для всех видов стоматологической керамики

- Первая одноступенчатая система полировки.
- Предварительная и завершающая полировка без замены инструмента.
- Высокая прочность.
- Минимальное тепловыделение.

* при 6.000-20.000 оборотах в минуту

Код	Наименование	Диаметр/ мм
207-0001	Полир Пламя P3.Polish, 1 шт.	5,5 x 15,0
207-0002	Полир диск P3.Polish, маленького размера, 1 шт.	17,0 x 2,6
207-0003	Полир диск P3.Polish, большого размера, 1 шт.	26,0 x 1,3
207-0004	Полир диск P3.Polish, линза, маленького размера, 1 шт.	26,0 x 0,8



Диски отрезные Neo.Cut

Высокоэластичные алмазные отрезные диски

- Двойной слой стекловолокна для прочности.
- Высокая режущая сила.
- Минимальный износ.
- Минимальное тепловыделение.
- Цветная мандрель для отличия от остальных инструментов.

*Макс. 50.000 оборотов в минуту



Алмазный диск Neo.Trim

Абразивный алмазный диск для обработки керамики


Подходит для обработки циркония, дисиликата лития и для всех видов стоматологической керамики

- Высокая абразивность.
- Эффективное удаление литников.
- Высокая прочность.
- Минимальное тепловыделение.
- Цветная мандрель для отличия от остальных инструментов.

*макс. 35.000 оборотов в минуту

Код	Наименование	Диаметр/ мм
205-0001	Диски отрезные Neo.Cut (для циркония, дисиликата лития, керамики), 10 шт.	20,0 x 0,25
205-0002	Алмазный диск Neo.Trim (для циркония, дисиликата лития, керамики), 1 шт.	20,0 x 0,8
205-0003	Диски отрезные Neo.Cut (для металла), 20 шт.	22,0 x 0,3
205-0004	Диски отрезные Neo.Cut (для металла и паковочной массы), 20 шт.	40,0 x 0,4

Код: 7066

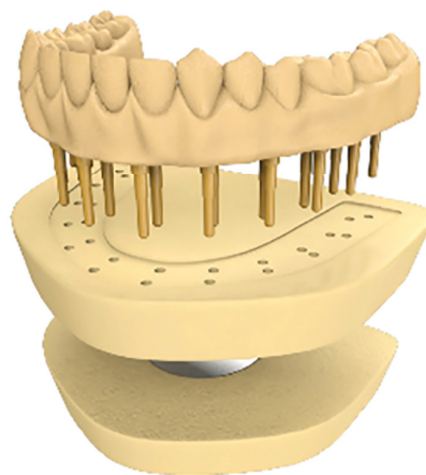

Код: 7065

Сепаратор модели ModelSep

Точное изолирование модели

- Точное разделение.
- Не образует пленку.
- Не требует времени для высыхания - высыхает при контакте.
- Подходит для всех видов гипса, даже для укрепленных пластмассой.

Код	Наименование
7065	Сепаратор модели ModelSep, спрей 236 мл
7066	Сепаратор модели ModelSep, дополнительная бутылочка 946 мл

Код: 7061



Код: 7060

Жидкость для снятия поверхностного натяжения Surfactant

Модельное литье без пузырьков

- Уменьшает поверхностное натяжение на воске и слепочном материале.
- Надежно работает в том числе на полиэфирных слепочных массах (например Impregum™) и на алгинате.
- Мелко распыляющееся средство не требует времени для высыхания.
- Улучшает текучесть гипсовых и паковочных масс.
- Не несет вреда для окружающей среды. Не содержит спирт.


Код	Наименование
7060	Жидкость для снятия напряжения Surfactant, спрей 236 мл
7061	Жидкость для снятия напряжения Surfactant, дополнительная бутылочка 946 мл



Компенсационный лак SureFit

Невероятная точность

- Отличная текучесть для точного нанесения лака.
- Создает твердую и плотную поверхность.
- Высыхает всего за 15 секунд.
- Доступен в 8 цветах.

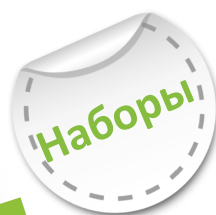

Код.: 7163

Код: 7162

Код	Наименование
7151	Штумпф-лак Surefit, синий, 15 мл.
7152	Штумпф-лак Surefit, серый, 15 мл.
7153	Растворитель Surefit, 15 мл.
7155	Штумпф-лак Surefit SCAN, оранжевый скан, 15 мл.
7156	Штумпф-лак Surefit, дентин, 15 мл.
7157	Штумпф-лак Surefit, серый, 15 мл.
7158	Штумпф-лак Surefit, красный, 15 мл.
7159	Штумпф-лак Surefit, золотой, 15 мл.
7160	Штумпф-лак Surefit, серебрянный, 15 мл.
7162	Набор штумпф-лаков Surefit, золотой/серебрянный/растворитель, по 15 мл.
7163	Набор штумпф-лаков Surefit, красный/синий/растворитель, по 15 мл.



MS3

Изолирующая жидкость „3-в-1“

- Подходит для изоляции штампов, керамики и композитов.
- Без масла для высокоэстетичных работ из керамики.
- Толщина слоя 0 мкм.
- Высыхает всего за 10 секунд.



MS1

Отвердитель для штампов и моделей

- Для защиты границ препарирования от повреждений.
- 0 мкм – для точной реставрации.
- Высыхает всего за 15 секунд.

Код	Наименование
7169	Отвердитель MS1, 30 мл.
7176	Отвердитель MS1, 236 мл (+дополнительная пустая бутылочка, 30 мл)
7177	Отвердитель MS1, карандаш (3 шт.)
7180	Изолирующая жидкость MS3, 30 мл
7183	Изолирующая жидкость MS3, 236 мл (+дополнительная пустая бутылочка, 15 мл)
7184	Изолирующее средство MS3, карандаш (3 шт.)



Цоколи для формирования модели, RediBase

Облегчает изготовление модели

- Гладкая, чистая поверхность.
- Четкие углы для нижней и верхней челюсти.
- Прозрачные одноразовые цоколи для формирования модели.



Код: 7192

Сепаратор для композитов SureSep

Изолирующий лак для композитов экстра-класса

- Изоляция на основе латекса для всех видов композита и гипса.
- 2-в-1 – изоляция и компенсационный лак – толщина слоя 20 мкм.
- Удаляется без остатка.

Код	Наименование
2021	Цоколи для формирования модели Redibase Full Arche Large, U/L, большая (100 шт./уп.)
2022	Цоколи для формирования модели Redibase Full Arche Small, U/L, маленькая (100 шт./уп.)
2023	Цоколи для формирования модели, прямоугольная Redibase, L/R (100 шт./уп.)
7192	Сепаратор для композитов SureSep Composite Release, 15 мл



Клей VersaGlue

Универсальный зуботехнический клей, 3 варианта вязкости

- Надежно склеивает гипс, металл, пластмассу и керамику.
- Точное нанесение для минимального расхода.
- Несклеивающийся аппликатор.
- Длительный срок хранения.



Цианоакрилат ZBase

Быстротвердеющий полимер на основе цианоакрилата

- Облегчает корректировку и блокировку штампов.
- Надежно держится на воске, металле, пластмассе и керамике.
- Для точного позиционирования аттачментов и имплантатов.
- Сгорает без остатка.
- Катализатор для ускоренного отверждения всех видов секундного клея.

Код	Наименование
2025	Клей зуботехнический, VersaGlue PX-4, низковязкий. 28 гр.
2026	Клей зуботехнический, VersaGlue PX-4, средневязкий. 28 гр.
2027	Клей зуботехнический, VersaGlue PX-4, высоковязкий. 28 гр.
2150	Материал для разблокировки моделей Zbase, 10 гр.
2151	Спрей-катализатор ZBase Accelerator Spray, 60 мл.
2152	Катализатор Zbase, 473 мл (+пустая бутылочка 60 мл.)



Жидкость для сканирования на системах CAD/CAM ScanInk

Новый уровень точности сканирования

- Сверхтонкий слой для наивысшей точности.
- Точное нанесение кисточкой или спреем.
- Не содержит пропеллентов – используется без остатка.
- Легко удаляется.
- Высыхает очень быстро.

Код	Наименование
202-0000	Жидкость для систем CAD/CAM ScanInk (250 мл, кисточка, пустая бутылочка с распылителем, воронка)
202-1000	Жидкость для систем CAD/CAM ScanInk MaxPack (1000 мл, кисточка, пустая бутылочка с распылителем, воронка)



Код: 309-0000



www.hp-dent.com/downloads




Инструмент для склеивания (индивидуальных) гибридных абатментов CLIP by Hans-Jürgen Joit

Разумный подход к гибридным абатментам

- Равномерное давление во время отверждения.
- Подходит для всех видов имплантатов.
- Облегчает работу, освобождая руки.
- Предотвращает вращение + неправильное позиционирование во время склеивания.

Код	Наименование
309-0000	Инструмент для склеивания гибридных абатментов CLIP



HPdent GmbH
Erwin-Dietrich-Str. 5
78244 Gottmadingen
Германия

Телефон +49 7731 38 11 044
Факс +49 7731 31 97 123

kontakt@hp-dent.com
www.hp-dent.com